

Autokláv Sterilizáló

Fogászati autokláv sterilizáló+nyomtató

- ▶ Az automatikus gőzsterilizátor olyan precíziós eszköz, amely az orvos vagy asszisztensei által végzett egyszerű, gyors és hatékony sterilizálásra szoruló műveleti alkalomra szakosodott, és az orvos vállalja a felelősséget az ilyen munkáért.
- ▶ A sterilizátor mikroprocesszort alkalmaz az intelligens vezérlés érdekében, amely megkönnyíti a kezelést. Teljesen automatizált vezérlés, dinamikus paraméterek és állapotjelzés.
- ▶ Automatikus hiba diagnosztika, túlhőmérséklet, túlnyomás automatikus védeleme a sterilizálás és fertőtlenítés megbízhatóságának biztosítása érdekében.
- ▶ A sterilizálás tartozékai közé tartoznak: Sterilizáló kamra, ajtóegység, szigetelőegység, csőrendszer, biztonsági szelep, vezérlőrendszer, tárolótartályok, szennyvíztartály, gőzfejlesztő és így tovább.
- ▶ 3 alkalommal pulzáló vákuum, hogy kevesebb levegő maradjon a kamrában, hogy jobb sterilizáló hatást biztosítson.
- ▶ Az LCD-képernyő mutatja az összes sterilizálási adatot, ami biztosítja a sterilizálási folyamat jobb ellenőrzését.
- ▶ A sterilizátorba szerelt biztonsági szelep van beépítve, ha a nyomás meghaladja a 0,27 MPa értéket. Az egyensúlyi nyomás a biztonsági szeleppel felszabadítható a működés biztonsága érdekében.

- ▶ A készülék önvédelmi funkcióval rendelkezik. Ha a víztartály vagy a vízgyűjtő víztartály megtelt, a sterilizálás befejeződik a sterilizálási eljárások végrehajtása esetén, de a gép nem tudja elindítani a következő műveletet, hacsak nem ad hozzá vizet vagy vízelvezetést. Lesz egy hangjelzés, amely emlékezteti a felhasználókat a víz hozzáadására vagy a vízelvezetésre.
- ▶ Ez a termék alkalmazható a fogorvosi eszközökön, műtői eszközökön, egészségügyi, anyagokon és más hőálló tárgyakon, amelyek megtalálhatók a fogászati, szemészeti sebészet és laboratóriumok részlegén.

Tulajdonságok:

- ▶ Fertőtlenítési módszerek: háromszori pulzációval történő vákuum magas hőmérsékletű szterilizálás
- ▶ A sterilizátor belső kamrája: 23L: 250mm X 450mm
- ▶ Feszültség: 110V/60Hz, 220V 50Hz, mindkettő elérhető. Szállítást a különböző helyszínek alapján végezzük.
- ▶ Teljesítmény: 2300w
- ▶ Sterilizálás (nyomás/hőmérséklet):
 - 90~130KPa/121°C (szabványos -standard- légköri nyomás)
 - 20~230KPa/134°C (szabványos -standard- légköri nyomás)
- ▶ Kezelőpanel: nyomógombos működtetés + LCD-panel
- ▶ Panel anyaga: magas hőmérsékletű matt antisztatikus anyag
- ▶ Test anyaga: 304 rozsdamentes acél belső bélés



TOOTOO MEDITECH CO., LTD.

Cím: RM 607, HAIHANG CITY BUSINESS CENTER, LONGGANG, SHENZHEN, CHINA

Tel: +86-755-28306385

Email: info@newtootoo.com


Web.: www.newtootoo.com

Termékmodell:

Termék modell	Termék térfogata	Termék mérete	Súly
WR-M/12L	200*360mm	56*45*41cm	46KG
WR-M/16L	230*350mm	56*45*41cm	48KG
WR-M/18L	250*350mm	56*45*41cm	50KG
WR-M/23L	250*450mm	68*45*41cm	55KG



Sterilizátor beépített kosara és tálca mérete:

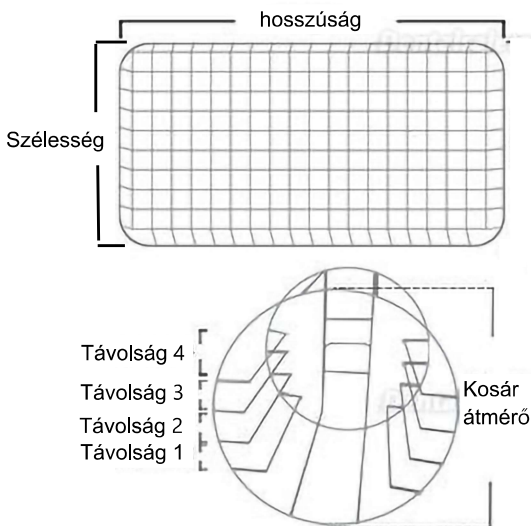

Úrtartalom Méret	12L	16L	18L	23L
Nagy tálca	30.5CM*17.3CM	29.5CM*21.0CM	29.5CM*22.7CM	39.5CM*22.7CM
Közepes tálca	30.5CM*14.7CM	29.5CM*18.3CM	29.5CM*21.0CM	39.5CM*21.0CM
Kis tálca	30.5CM*14.7CM	29.5CM*18.3CM	29.5CM*20.0CM	39.5CM*20.0CM
Kosár átmérő	18.5CM	21.8CM	23.8CM	23.8CM
Távolság 1	3.2CM	4.4CM	2.9CM	2.9CM
Távolság 2	4.3CM	4.7CM	2.9CM	2.9CM
Távolság 3	/	/	2.9CM	2.9CM
Távolság 4	3.1CM	4CM	5CM	5.3CM

A fent említett méretek kézi méréssel lettek meghatározva. Különböző személyes mérési módszerek miatt előfordulhatnak kisebb hibák, ezek csak tájékoztató jellegűek.

TOOTOO MEDITECH CO., LTD.

Cím: RM 607, HAIHANG CITY BUSINESS CENTER, LONGGANG, SHENZHEN, CHINA

Tel: +86-755-28306385

Email: info@newtootoo.com

Web.: www.newtootoo.com