




TooToo MediTech Co., Ltd.

MSP6

Állatorvosi érintőképernyős fecskendőpumpa



Wi-Fi

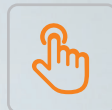

4"-os érintőképernyő




Automatikus fecskendő-
behelyezési funkció



1 ml-es és 2 ml-es
fecskendők támogatása




4 hüvelykes színes érintőképernyő

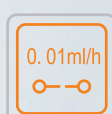

Minimális áramlási sebesség:
0,01 ml/h



12 infúziós üzemmód

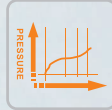

15 elzáródásérzékelési fokozat



Beépített dóziskezelés



Cím: 3A, Phase II, Smart Home, Baolong Street,
Longgang District, Shenzhen, Guangdong, Kína
Tel.: +86-755-28306385 E-mail: info@newtootoo.com
Web: www.newtootoo.com



A fecskendő automatikus
behelyezése 2 másodperc alatt



Intuitív kezelőfelület az
egyszerű használatért



Biztonságos
infúziókezelő rendszer

Műszaki adatok

Dugattyúfej-mechanizmus	Motoros automatikus dugattyúfej			
Infúziós üzemmódok	Sebesség üzemmód Vegyes üzemmód Telítő dózis üzemmód	Idő üzemmód Váltó üzemmód Mikro üzemmód	Testtömeg üzemmód Szakaszos dózis üzemmód Gradiens üzemmód	Dózis üzemmód Lépcsős üzemmód Gyógyszerkönyvtár üzemmód
Alkalmazható fecskendők	1, 2, 5, 10, 20, 30 és 50 ml-es fecskendők			
	Nyílt rendszer: új márkák utólag bővíthetők, kalibrálás után minden szabványos fecskendővel kompatibilis; opcionális dedikált készlet			
Kijelző	4,0 hüvelykes színes kapacitív érintőképernyő, 8 fokozatban állítható fényerő			
Áramlási sebesség tartománya	1 ml-es fecskendő: 0,01–50,00 ml/h			
	2/3 ml-es fecskendő: 0,01–150,00 ml/h			
	5/6 ml-es fecskendő: 0,10–300,00 ml/h			
	10/12 ml-es fecskendő: 0,10–800,00 ml/h			
	20 ml-es fecskendő: 0,10–1200,00 ml/h			
	30/35 ml-es fecskendő: 0,10–1500,00 ml/h			
	50/60 ml-es fecskendő: 0,10–2300,00 ml/h			
Lépésköz	0,01 ml/h (0,10–99,99 ml/h sebességtartományban) 0,1 ml/h (100,0–999,9 ml/h sebességtartományban) 1 ml/h (1000–2300 ml/h sebességtartományban)			
VTBI-tartomány	0,01–9999,99 ml, lépésköz 0,01 ml; a „0” az alapértelmezett térfogatot jelenti			
Idő üzemmód	VTBI: 0,1–9999,9 ml Idő: 00:00:01–99:59:59 (ó:p:mp)			
Áramlási pontosság	≤ ±2%			
Bolus üzemmód	Kézi / félautomata / automata			
Automatikus bolus térfogat	0,1–50 ml, lépésköz 0,1 ml			
Bolus sebesség	1 ml-es fecskendő: 0,01–50,00 ml/h		2/3 ml-es fecskendő: 0,01–150,00 ml/h	
	5/6 ml-es fecskendő: 0,10–300,00 ml/h		10/12 ml-es fecskendő: 0,10–800,00 ml/h	
	20 ml-es fecskendő: 0,10–1200,00 ml/h		30/35 ml-es fecskendő: 0,10–1500,00 ml/h	
	50/60 ml-es fecskendő: 0,10–2300,00 ml/h			
KVO-sebesség	0,01–10,0 ml/h, 0,1 ml/h lépésközzel			
Elzáródási nyomás	Dinamikus nyomáskijelzés, 15 elzáródásnyomás-küszöbszint választható			
Gyógyszerkönyvtár	Legalább 12 gyógyszerkategória támogatása, legalább 5000 gyógyszernév tárolása, a gyógyszerek legalább 12 színnel jelölhetők			
PCA/TIVA	Opcionális			
Wi-Fi	Opcionális Wi-Fi kapcsolat			
Eseménynapló	Több mint 30 000 bejegyzés			
Online paraméterállítás	Paraméterek módosítása az infúzió leállítása nélkül			
Anti-bolus funkció	Igen: a motor visszafelé forgatva szünteti meg a nyomást			
Riasztás	8 fokozatban állítható riasztási hangerő			
Adatsatlakozó	USB, Type-C, funkcióport			
Riasztások (vizuális és hangjelzés)	Nincs művelet, közel üres, szorítóhiba, alacsony akkumulátorfeszültség, KVO-adagolás, befejezés utáni készenlét, hálózati feszültség kimaradása, akkumulátor eltávolítva, közel a befejezéshez, infúzió befejeződött, tolószerszék-hiba, üres, elzáródás, motorhiba, rögzítőkaram-hiba, rendszerhiba, szekvenciális infúzió meghíúsulása			
Tápellátás	AC: 100–240 V, 50/60 Hz, 50 VA			
Akkumulátor	Li-ion akkumulátor, DC 11,1 V, 2600 mAh, üzemidő: ≥7 óra 5 ml/h mellett			
Besorolás	I. osztály, CF típus, IP34			
Méretek és nettó tömeg	264 × 159 × 78 mm, kb. 1,8 kg (akkumulátorral együtt)			